

免费服务热线：400 0566 301



关注微信公众号

ChenWei 晨伟

以科技创新引领智慧医疗

安全 稳定 舒适 呼吸



T50 呼吸机

ChenWei 晨伟 南京晨伟医疗设备有限公司

地址：南京市江宁开发区胜太西路93号 电话：025-86989898-100 传真：025-57918626 Email: njcw4497@sina.com http: // www.chenwei-med.com

规格参数如有变动，恕不另行通知，产品内容以实物为准，本资料内容仅供参考。

电动电控

先进的涡轮控制技术，**智能通气**


给患者带来更加舒适的呼吸体验



撤机辅助



通气评估

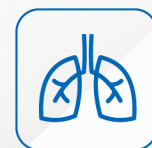

肺保护支持



智能同步

应用广泛 轻巧便携

急诊科

ICU

院内/外转运

术后恢复

轻巧便携

主机重量轻，操作方便，
可直接手提
主机重量 $\leq 10\text{kg}$

电动电控

高性能涡轮电机，可直接
使用空气作为气源，最大
峰值流速 $\geq 210\text{L/min}$

序贯治疗

具备有创、无创通气，高流量
氧疗功能，为患者提供从入院
到出院的全流程呼吸支持

主机易于安装、便于拆卸
12.1英寸液晶电容触摸屏
操作简单方便

可调温湿化器
多功能台车



强劲动力 安全保护

强劲的涡轮动力，安全稳定的控制系统，双氧气源设计，支持高压氧气源和低压氧气源，吸气阀、呼气阀组件一体化设计，拆卸方便，可耐134℃高温、高压消毒，为患者提供安全保护。

性能稳定 控制精确

能够适应在各种复杂环境下的急危重症治疗，潮气量所设即所得。



有创通气

- 安全稳定的控制系统
- 全面的通气模式和辅助监测功能
- 潮气量动态补偿功能
- 增氧吸痰功能

院内/外转运

- 主机小巧轻便，可直接手提
- 安装方便，主机到台车，一键完成
- 内置锂电池，满足转运供电需求
- 一键锁屏功能，防止误操作

无创通气

- 多种无创通气模式
- 安全有效的漏气补偿功能
- 高流量氧疗功能
- 全面的监测、报警功能

直观简洁 易于操作




- 扁平化界面设计，全中文操作与显示；
- 两步即可轻松到达所需工作界面；
- 屏幕角度上下可调，便于清晰观察；
- LED 报警灯光，报警信息及时发现；



动态肺视图实时显示

全面的通气模式


从有创通气到无创通气全流程支持，多种通气模式及功能有效提高人机同步效果，使患者呼吸更加舒适，满足各种年龄段不同患者的通气需求。

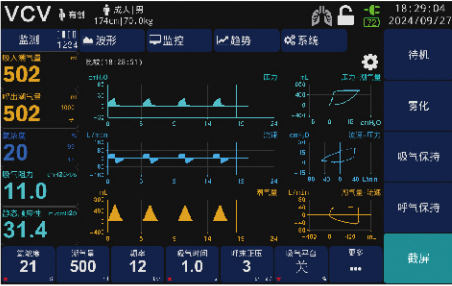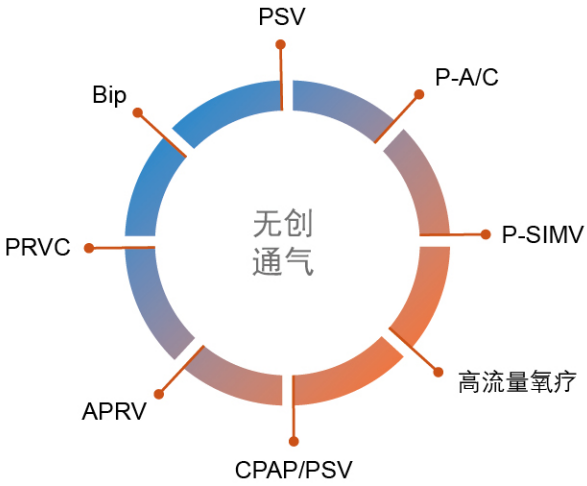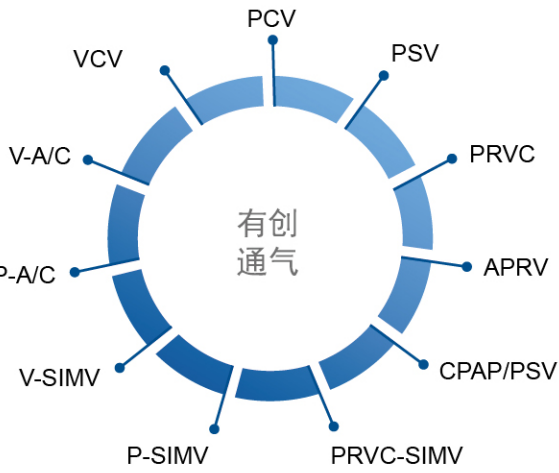

波形图、环形图同屏显示


智能通气 决策自如

多种辅助工具和监测功能，先进的潮气量自动补偿功能和肺顺应性补偿功能，帮助医护人员快速、准确判断患者呼吸状态，辅助患者成功脱机。

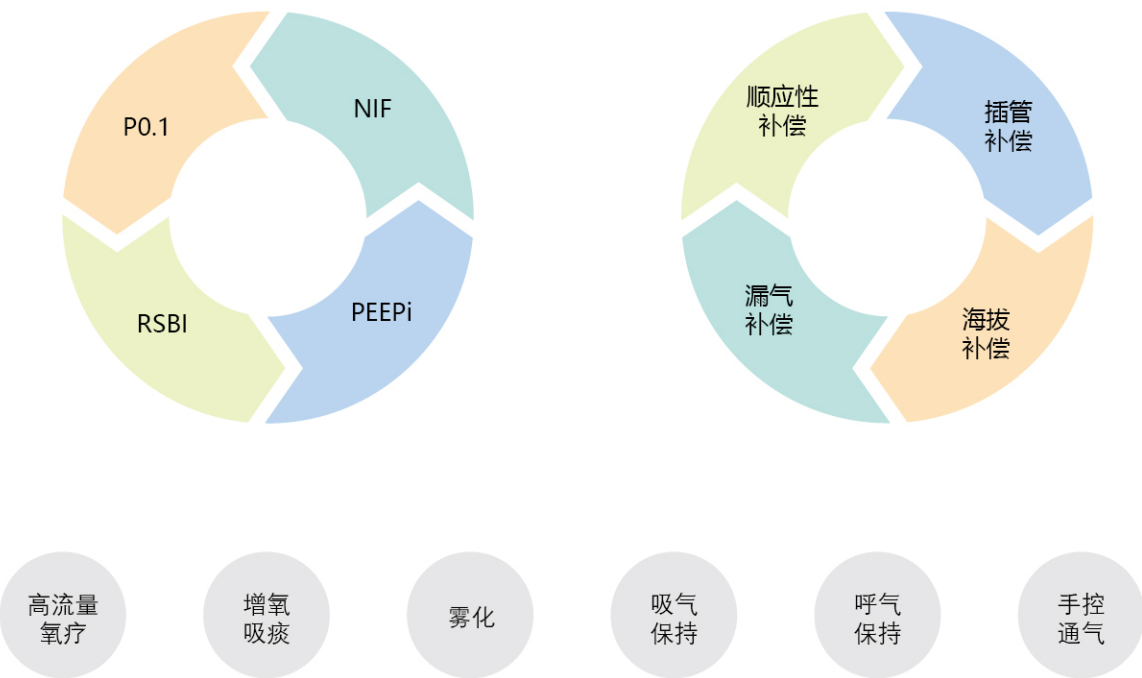

动态肺视图

将通气状态、呼吸参数、阻力、顺应性等信息进行可视化显示，模拟肺脏实时呼吸状态，方便临床医生观察。

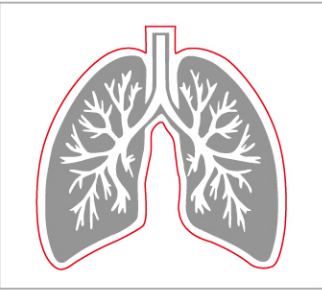


高流量氧疗

高流量氧疗可快速提高血氧饱和度，减轻患者缺氧症状，呼吸机内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%~100%，最高气体流量：80L/min，并具有氧疗计时功能。

肺复张工具

在机械通气过程中，间断性给予高于常规气道压的压力，并维持一段时间能够使萎陷的肺泡复张，也可以预防小潮气量通气带来的继发性肺不张，从而预防肺部并发症的发生。目前常用的方法主要有控制性肺膨胀法、PEEP递增法、压力控制法等。

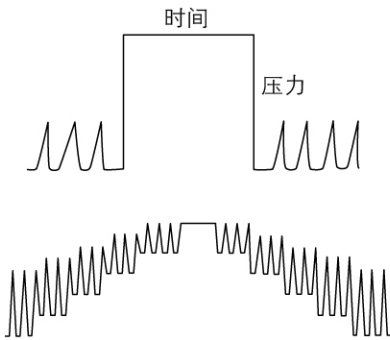

事件日志 实时回顾

提供72小时趋势分析图、存储至少3000条以上日志及报警信息，关机后再开机或出现电源故障后，日志记录仍然保留，不会被清除，数据可导出。

信息互联 高效管理

具备 Ethernet、COM、HDMI、2个USB接口，可连接院内、院外网络、监护仪等设备，数据可导出；
系统升级维护方便；
可选配：CO₂ 监测模块；

